

geemarc™ CL7350
Hear the Difference

**BEZDRÁTOVÁ POSLECHOVÁ
SOUPRAVA CL7350**



www.geemarc.com

Návod k obsluze

Obsah

Před prvním použitím přístroje si důkladně přečtěte návod k použití. Návod uschovejte pro případnou budoucí potřebu.

ÚVOD	2
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	2
OBSAH BALENÍ	3
• Sluchátka-přijímač	4
• Základna-vysílač, nabíjecí jednotka	5
INSTALACE	6
• Základna-vysílač nabíjecí jednotka	6
• Sluchátka-přijímač	7
PROVOZ	8
• Uvedení do provozu	8
• Běžný provoz	9
• Přepínání kanálů	10
• Ovládání tónu (basy a výšky)	11
• Nastavení vyvážení zvuku (vlevo-vpravo)	12
• Přepnutí na mikrofon.....	12
• Nabíjení baterie	13
TECHNICKÉ ÚDAJE	14
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	15
• Bez zvuku	15
• Zkreslení	15
Čištění a údržba	16
Náhradní díly	16
ZÁRUKA	17
CE PROHLÁŠENÍ	17
ZÁRUČNÍ LIST	18

ÚVOD

Bezdrátová souprava Geemarc CL7350 je zesilovací zařízení speciálně navržené pro nedoslýchavé. Umožňuje zesílený poslech televizního/rozhlasového přijímače nebo zesílení řeči přes vestavěný mikrofon.

Zvuk z televizoru nebo rádia je přenášen bezdrátově ze základny do sluchátek. Poslech je možný až do vzdálenosti 25 metrů od základny.

Možnost **nastavení intenzity hlasitosti do levého a pravého ucha a oboustranné nastavení výšek a basů** dle potřeby uživatele.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím přístroje si důkladně přečtěte návod k použití.

Varování: Zvuk vycházející ze sluchátek může být velmi hlasitý. Pokud takto nastavená sluchátka použije osoba bez sluchového postižení může dojít k poškození sluchu.

Pozor: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Toto zařízení může být připojeno do sítě pouze přes síťový adaptér dodávaný s přístrojem.

Specifikace elektrického připojení: Přístroj je určen pro elektrický rozvod 100-240VAC-50/60Hz. Klasifikace „nebezpečného napětí“ dle normy EN60950.

Přístroj také lze vypnout odpojením od sítě. Při instalaci se ujistěte, že síťová zásuvka je snadno přístupná.

Důležité upozornění: Nebezpečí výbuchu při použití nesprávného typu baterií. Baterie by měla být vyměněna autorizovaným prodejcem.

Nevystavujte přístroj vysokým teplotám a slunečnímu záření.


Chraňte před deštěm nebo vlhkostí.

Přístroj nikdy sami neotvírejte.

Pravidelně přístroj čistěte.


Přístroj může být rušen zařízeními, které generují silné elektrické nebo magnetické pole. Může se jednat o mikrovlnné trouby, mobilní telefony, transformátory osvětlení apod.

OBSAH BALENÍ

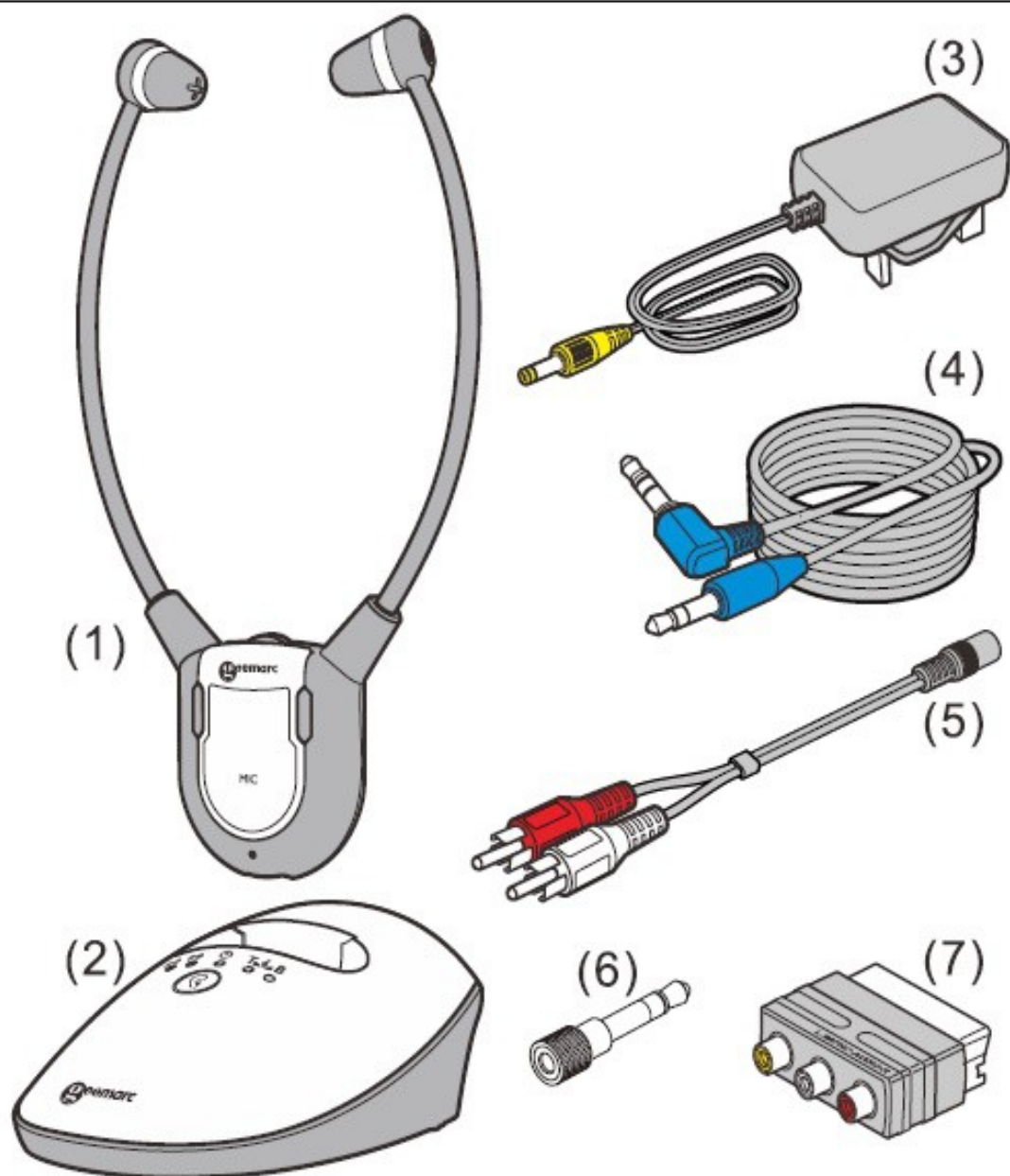


1. sluchátka – přijímač
2. základna – vysílač, nabíjecí jednotka
3. síťový kabel s adaptérem
4. kabel Jack 3,5 mm/3,5 mm
5. adaptér Jack 3,5 mm na 2 pin RCA
6. redukce Jack 3,5 mm/6,3 mm
7. adaptér 2 pin RCA na konektor Scart

Sluchátka – přijímač

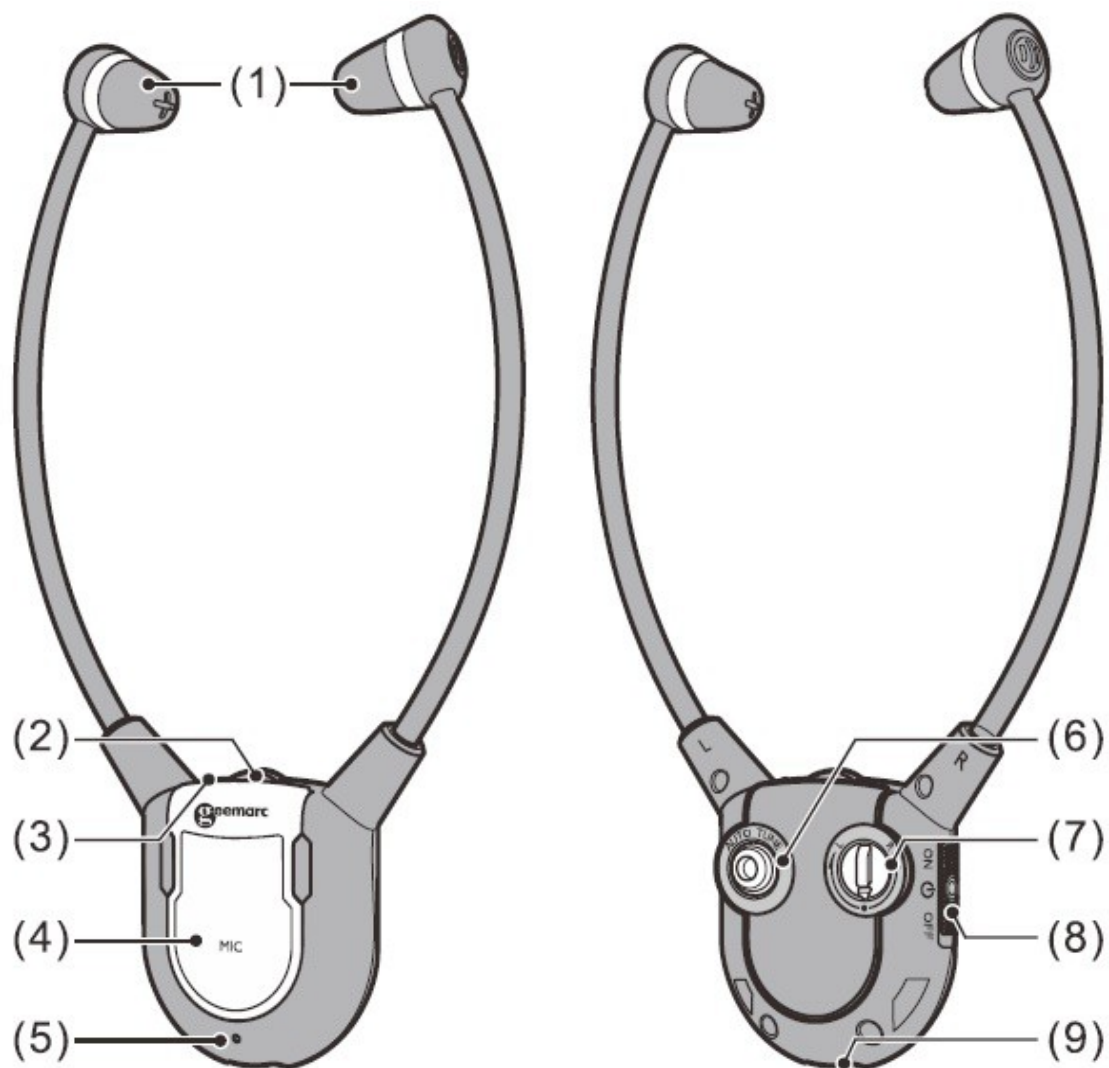

1. náušníky sluchátek
2. ovládání hlasitosti
3. napájení – LED indikátor
4. tlačítko pro přepínání na mikrofon
5. mikrofon
6. tlačítko pro přepínání kanálu
7. vyvážení hlasitosti levé/pravé ucho
8. spínač zapnuto/vypnuto
9. kontakt baterie


Základna-vysílač, nabíjecí jednotka

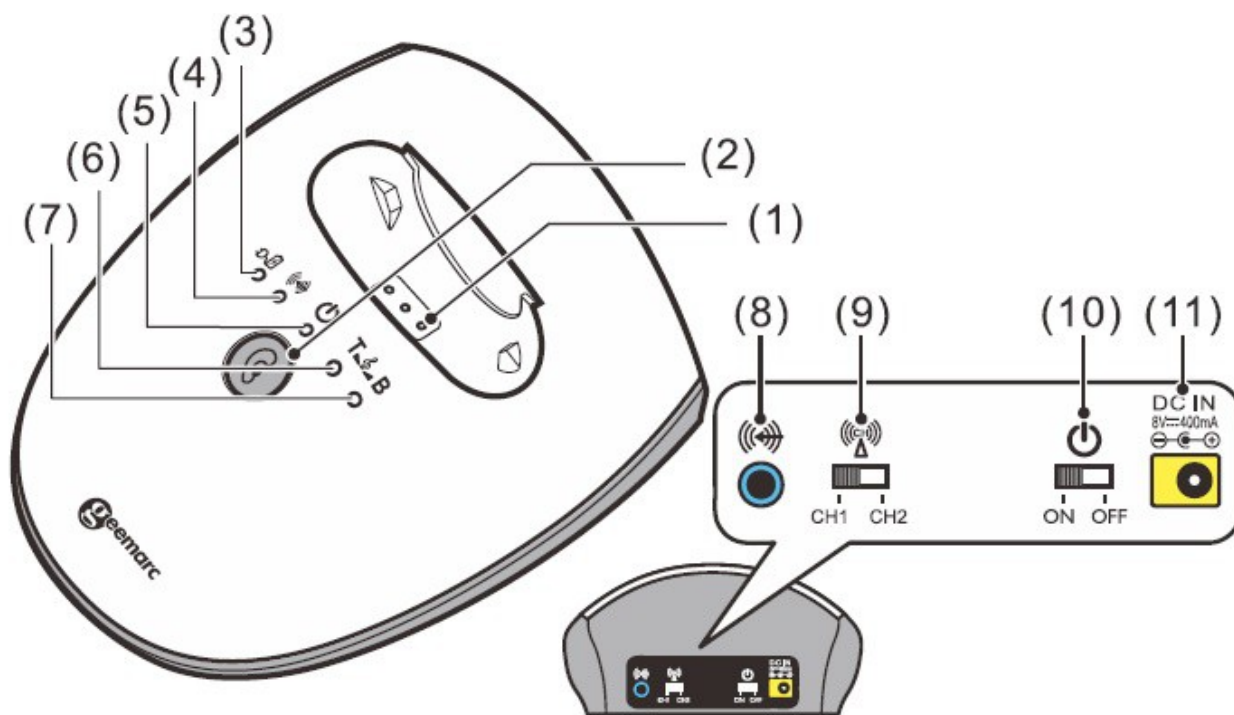

1. nabíjecí kontakty
2. nastavení tónu
3. LED indikátor nabití baterie (červená – nabíjení, zelená – plně nabito)
4. LED indikátor (zelená) – audio signál
5. LED indikátor (zelená) – zapnuto
6. LED indikátor (žlutá) – zvýrazněné výšky
7. LED indikátor (modrá) – zvýrazněné basy
8. vstup pro příjem zvuku 3,5 mm
9. přepínání kanálu CH1 / CH2
10. spínač zapnuto/vypnuto
11. vstup pro napájení

INSTALACE

Základna

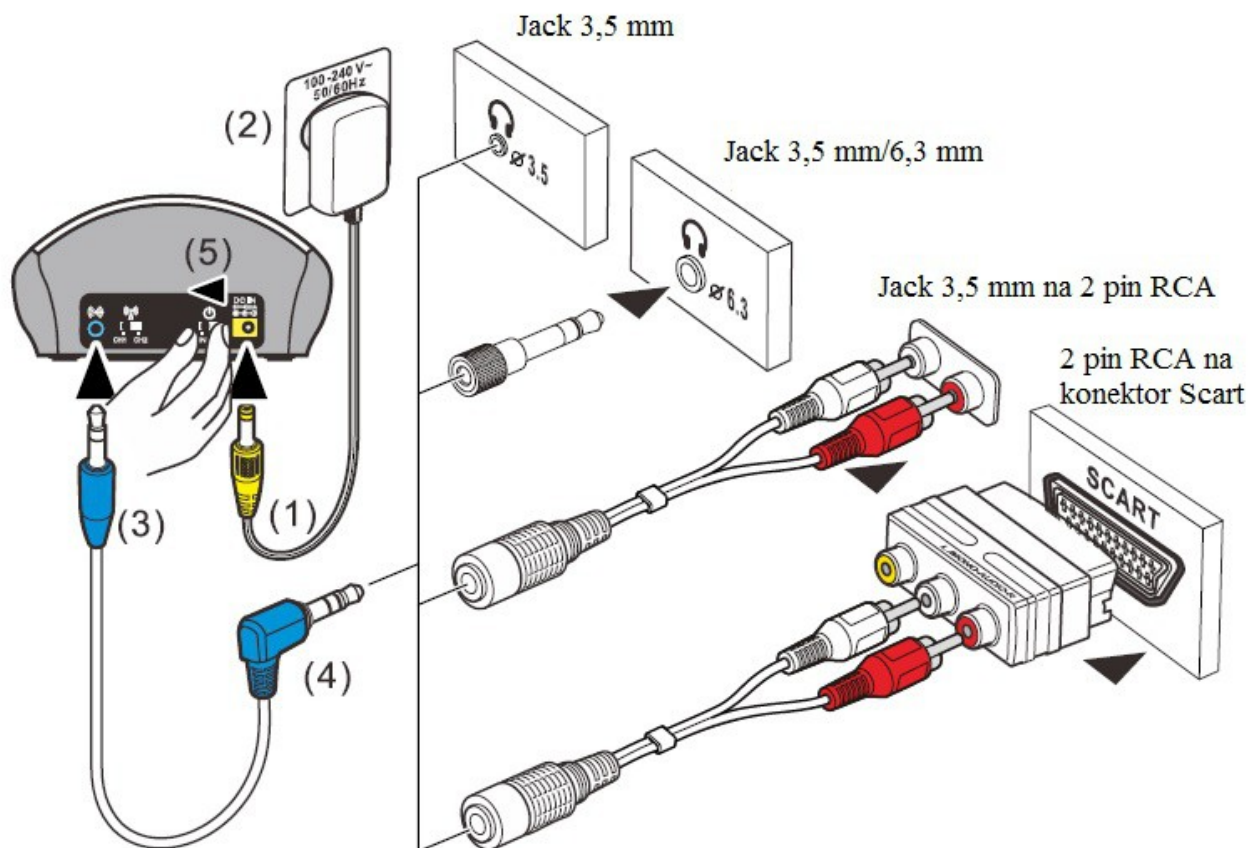

1. napájecí jack vložte do vstupu na základně DC IN
2. napájecí adaptér zasuňte do elektrické zásuvky 230 V
3. jeden konec zvukového kabelu vsuňte do vstupu pro příjem zvuku 3,5 mm
4. druhý konec připojte ke zdroji zvuku (televize, radio..)

Pokud vaše televize, rádio (jiný zdroj zvuku) nemá vhodnou zásuvku pro 3,5 mm stereo zvukový kabel, pak použijte jeden z následujících adaptérů


- adaptér Jack 3,5 mm na 2 pin RCA
- redukce Jack 3,5 mm/6,3 mm
- adaptér 2 pin RCA na konektor Scart

Na zadním panelu nabíječky, přepněte spínač ON/OFF na ON

Je-li detekován zvukový signál ze zvukové zdroje, zelená LED dioda bude svítit trvale.

Sluchátka




Ujistěte se, že vestavěná baterie uvnitř sluchátek je před prvním použitím plně nabitá.

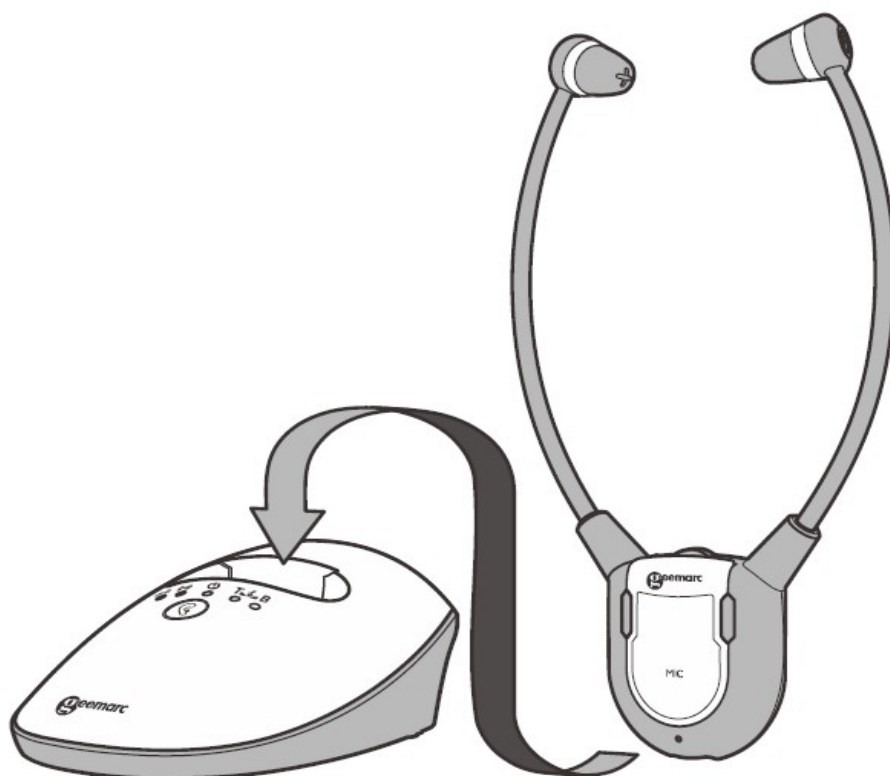

PROVOZ


Uvedení do provozu

1. Ujistěte se, že je CL7350 zapojen do elektřiny.
2. Zapněte CL7350 - na zadní straně spínač zapnuto/vypnuto (viz obrázek 1).
3. Položte sluchátka do základny nejméně na tři hodiny, aby se akumulátor mohl plně nabít.
 - Ujistěte se, že sluchátka jsou vypnuta (viz obrázek 2).
 - Během nabíjení svítí LED indikátor červeně.
 - Svítit-li zeleně, je baterie plně nabitá (viz obrázek 3).
4. Vestavěný akumulátor je plně nabitý po třech hodinách - LED indikátor svítí zeleně.

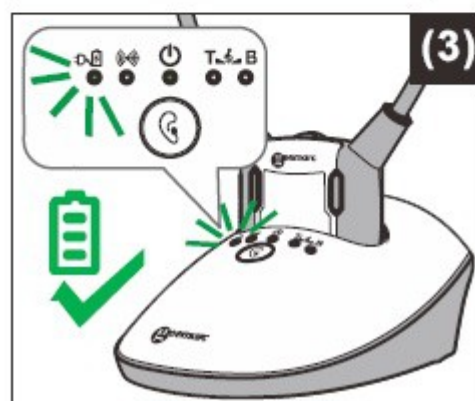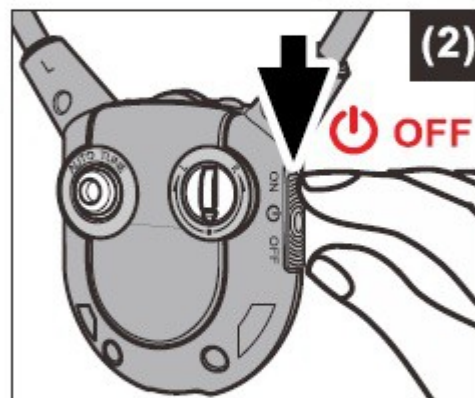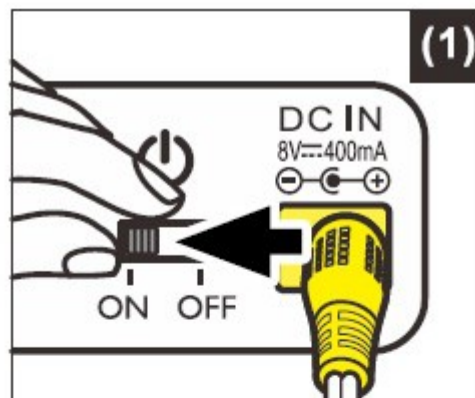


Běžný provoz


1. Zapněte zdroj zvuku (TV nebo zvukové zařízení), které je připojeno k základně. LED indikátor pro signál bude svítit trvale zeleně (viz obrázek 4).

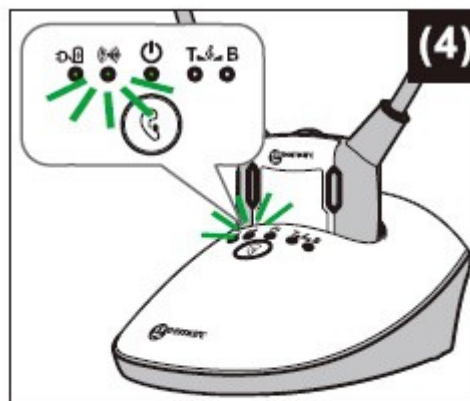

2. Zapněte sluchátka - spínač zapnuto/vypnuto (on/off) do polohy zapnuto (on) viz obrázek 5). LED indikátor svítí trvale zeleně.

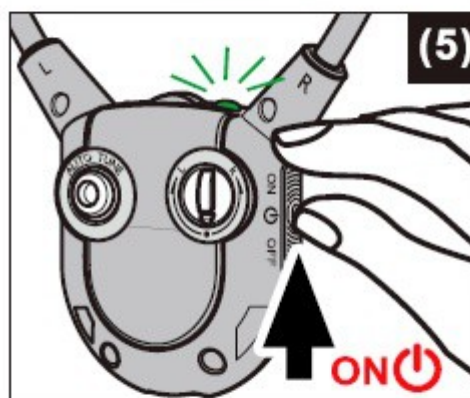

3. Nastavte hlasitost na požadovanou hladinu (viz obrázek 6).
POZNÁMKA: Ujistěte se, že hlasitost na zdroji zvuku (televizoru nebo jiné zvukové zařízení) je zapnuta nejméně do poloviny jeho zesílení.

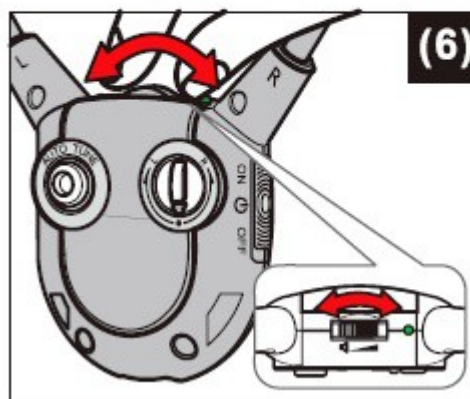



Přepínání kanálů

Zlepšení zvuku pomocí přepínání kanálů

CL7350 může vysílat na dvou frekvencích – 2 kanály.

Podle potřeby můžete zvolit kanál, který bude produkovat lepší kvalitu zvuku.

1. Pokud je zvuk zkreslený nebo nejasný, stiskněte sluchátkách tlačítko AUTO TUNE (viz obrázek 7), aby odpovídal frekvenci nastavení kanálu 1 nebo 2 na zadní straně základny. Přidržte několik vteřin.
2. Pokud to nepomůže, přepněte volič kanálu na zadní části základny na druhý kanál (viz obrázek 8)
3. Opět stiskněte na sluchátkách tlačítko AUTO TUNE pro nastavení kanálu

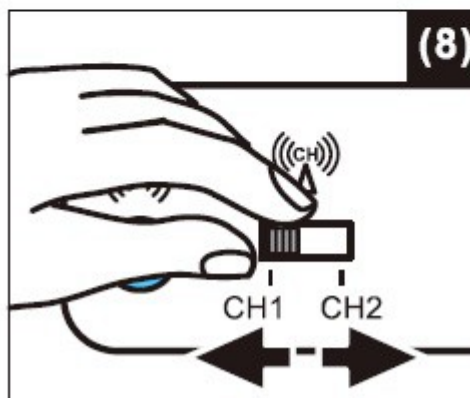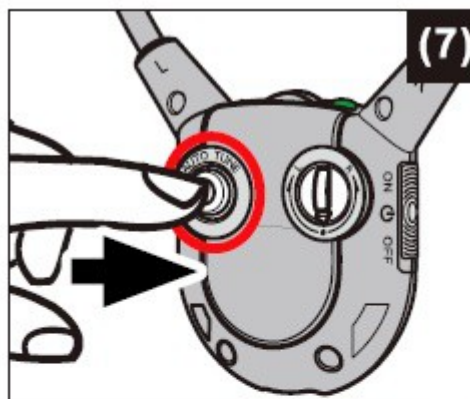

POZNÁMKA


Pokud neexistuje žádný zvukový signál ze zdroje zvuku (TV nebo jiné zvukové zařízení) nebo signál ze zdroje zvuku je příliš slabý pro řádný příjem, vysílač se po 5 minutách automaticky vypne.


V případě, že se obnoví zvukový signál nebo se vrátí do přijatelné úrovně, vysílač se automaticky zapne.

Ovládání tónu (basy a výšky)


Podle potřeby můžete nastavit tón zvuku, který posloucháte a tím zvýšit svůj požitek z poslechu zesílením nebo potlačením výšek/basů ve sluchátkách

Stiskněte tlačítko Tone Clarity  - přepíná mezi možnostmi

1. Zvýraznění výšek (žlutá LED svítí) 


2. Zvýraznění basů (modrá LED svítí) 

3. Vyrovnaný tón - basy a výšky na stejné úrovni (žádné LED nesvítí).

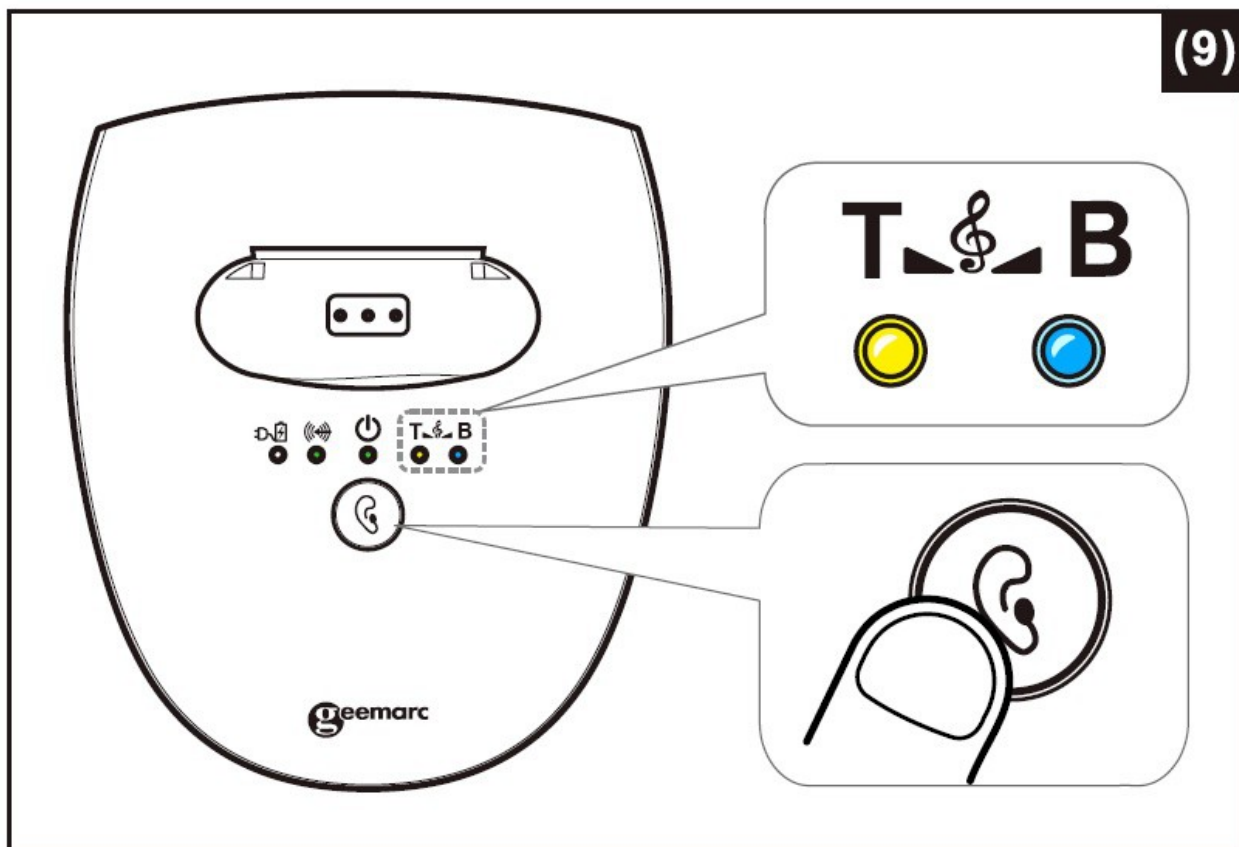

Nastavení vyvážení zvuku (vlevo-vpravo)


Podle potřeby můžete nastavit zvuk tak, aby vyhovoval Vašemu sluchu. Použijte otočný knoflík Sound Balance (viz obrázek 10) pro nastavení poměru hlasitosti mezi levým a pravým uchem. Otáčejte knoflíkem nalevo nebo napravo, dokud nenajdete vyváženou hlasitost pro Váš poslech.

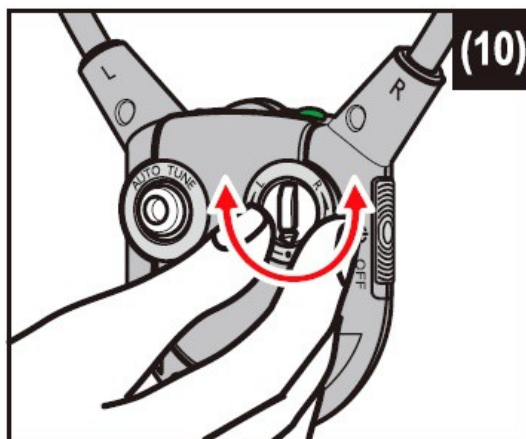

Přepnutí na mikrofon

Můžete přepnout z poslechu (TV nebo jiný zdroj zvuku) do režimu konverzace přes zabudovaný mikrofon, aniž by bylo nutné sundat sluchátka.


1. Stiskněte tlačítko MIC (viz obrázek 11). Sluchátka se přepnou do režimu konverzace. Je aktivovaný zabudovaný mikrofon.
2. Chcete-li pokračovat v poslechu zvukové zařízení (TV) stiskněte znovu tlačítko MIC. Mikrofon se vypne.

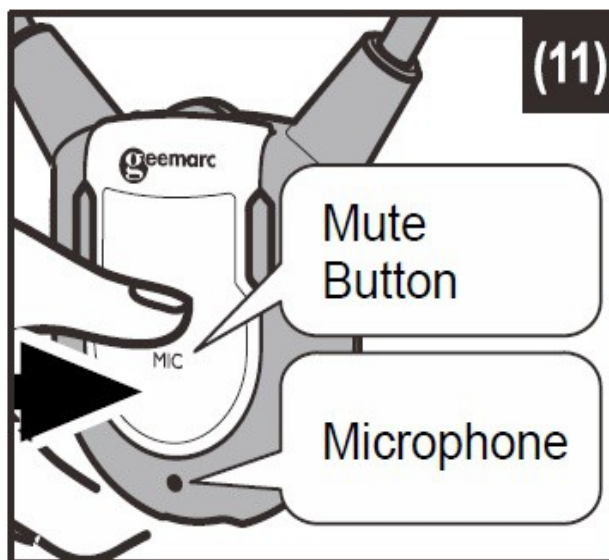


Nabíjení baterie

1. Když je hladina nabití baterie nízká, signální LED dioda na sluchátkách začne pomalu blikat. V tomto stádiu zbývá asi 20 minut provozu, než se sluchátka automaticky vypnou.

2. Vypněte sluchátka - spínač zapnuto/vypnuto (on/off) do polohy vypnuto (off) viz obrázek 12). Zelený LED indikátor zhasne.

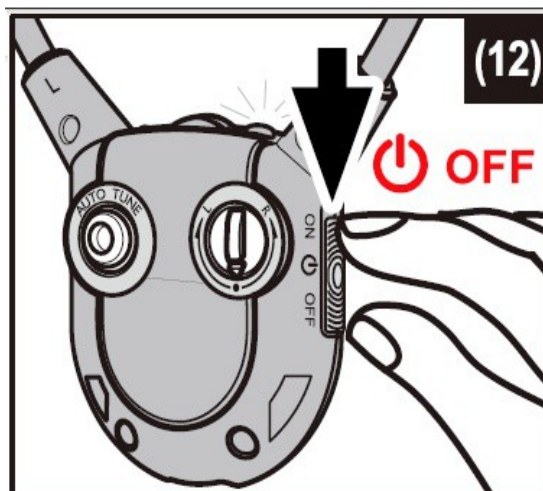

3. Vložte sluchátka do základny – nabíjecí jednotky (viz obrázek 13). Ujistěte se, že je náhlavní jednotka (sluchátka) správně uložena na dobíjecí kontakty.

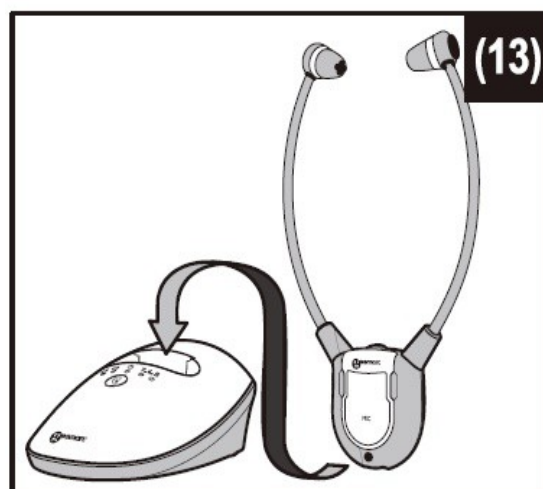

4. Proces nabíjení se automaticky spustí. LED indikátor svítí během nabíjení červeně.

5. Je-li baterie plně nabita, LED indikátor svítí zeleně.

VAROVÁNÍ:

Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je například sluneční svit, oheň atd.

Nepokoušejte se nahradit původní dobíjecí baterii.

Nejsou-li sluchátka v provozu, posuňte přepínač do polohy OFF (vypnuto).

Baterie musí být před prvním použitím vždy plně nabitá.

Před prvním použitím je zapotřebí nabíjet minimálně (3 hodiny). Tím bude zaručena správná životnost dobíjecí baterie.

Vždy zajistěte, aby při nabíjení v základně byl přepínač na sluchátkách v poloze OFF.

Zvuk vycházející ze sluchátek může být velmi hlasitý. Pokud takto nastavená sluchátka použije osoba bez sluchového postižení může dojít k poškození sluchu.

DŮLEŽITÉ

Tento přístroj by měl být provozován pouze s vestavěnou dobíjecí baterií.

Nepokoušejte se akumulátory demontovat.

Pro výměnu baterie navštivte prodejce nebo poskytovatele servisu.

Po skončení životnosti akumulátorů je nevyhazujte do směsného odpadu. Odevzdejte do recyklačních center, vyhrazených míst pro sběr baterií a akumulátorů nebo u vašeho dodavatele. Na těchto místech budou přijata zdarma.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní doba baterie: až 6 hodin

Dosah: až 60 metrů (v otevřeném prostoru)

Frekvenční odezva: 30 Hz - 10K Hz

Poměr signálu k šumu: > 65 dB

Zkreslení: <2%

Hmotnost: 58 gramů

Provozní napětí: Základna : 8V, 400mA

Sluchátka: 3,7 V, 350 mA lithium polymerová baterie

Režim přenosu: UHF Stereo

Taktovací kmitočet: 863,53 MHz, 864.53MHz



ŘEŠENÍ PROBLÉMU

NENÍ ZVUK

- Ujistěte se, že síťový adaptér je v zásuvce a kabel je zapojen do konektoru na základně sluchátek.
- Ujistěte se, že přepínač na sluchátkách je v poloze zapnuto (ON)
- Úroveň nabití je příliš nízká. Vraťte sluchátka zpět do základny sluchátek, dokud nebude svítit zelená kontrolka.
- Ujistěte se, že TV, video, HiFi je připojeno k základně..
- Ujistěte se, že hlasitost na zdroji zvuku (televizoru nebo jiné zvukové zařízení) je zapnuta nejméně do poloviny jeho zesílení.
- Zvyšte úroveň hlasitosti na sluchátkách.
- Vstupní úroveň hlasitosti je příliš nízká. Zvyšte hlasitost na TV, video, HiFi.


ZKRESLENÍ

- Úroveň nabití je příliš nízká. Vraťte sluchátka zpět do základny sluchátek, dokud nebude svítit zelená kontrolka.
- Sluchátka mohou být moc vzdálená od základny (vysílače). Přiblížte se k základně.
- Vstupní úroveň hlasitosti je příliš nízká. Zvyšte hlasitost na TV, video, HiFi.
- Pokud je zvuk zkreslený, můžete zvolit kanál, který bude produkovat lepší kvalitu zvuku

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nepoužívejte k čištění sluchátek chemická čistidla ani alkohol. Čistěte pouze vlhkým hadříkem. Pravidelně čistěte náušníky sluchátek pomocí teplé vody a mýdla.

V balení jsou dva druhy náušníků. K používání si vyberte velikost náušníku, která vám nejvíce vyhovuje.

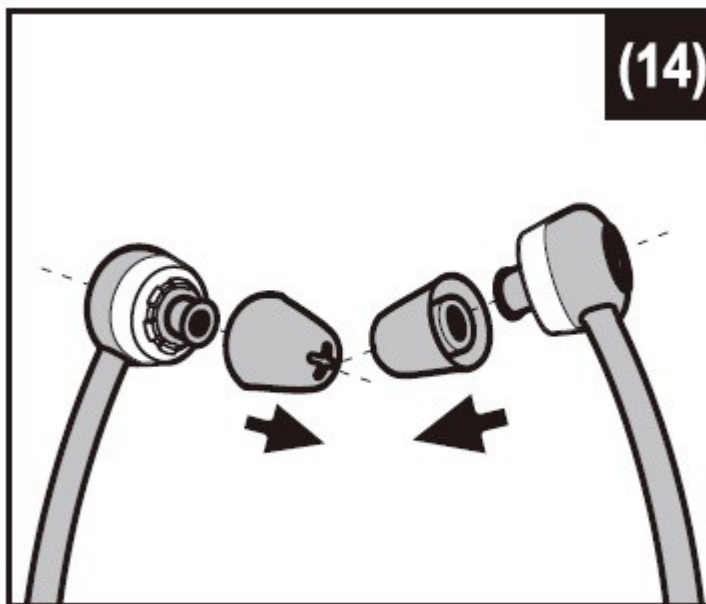

NÁHRADNÍ DÍLY

1. Doplnkové soupravy
2. Náušníky

Pro výměru akumulátoru sluchátek, kontaktujte prodejce.

DODAVATEL A POSKYTOVATEL SERVISU

Fonika Medical s.r.o. , Nám. 14.října 3, 150 00 Praha 5
tel. 222 360 807
e-mail: info@fonika.cz
www.fonika.cz

ZÁRUKA

Na digitální bezdrátovou poslechovou soupravu Geemarc CL7350 se vztahuje záruka na výrobní vady materiálu a zpracování po dobu dvou let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na nedostatky vzniklé nesprávným používáním, opotřebením nebo způsobené násilím. Přístroj nesmí být rozebrán nebo porušen kýmkoliv bez oprávnění.

Výrobce potvrzuje, že přístroj splňuje evropské normy. Přístroj je vyráběn ve shodě s příslušnými evropskými předpisy. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. K nahlédnutí na stránkách výrobce www.geemarc.com



Upozornění týkající se akumulátorů:

Nepokoušejte se akumulátory demontovat.

Akumulátory **nehazujte** do ohně.

U akumulátorů dodržujte správnou polaritu +/-

Akumulátory **nepolykejte**.

Akumulátory **nezkratujte**.

Nefunkční akumulátory již nekládejte do zařízení.

Používejte pouze akumulátory Geemarc.

POZOR: Při nesprávném vložení akumulátorů hrozí nebezpečí výbuchu.

Akumulátory používejte podle pokynů v návodu.

Adaptér pro síťové napájení. Vyberte koncovku dle potřeby a zasuňte.



ZÁRUČNÍ LIST

Na výrobek je poskytována **záruka 24 měsíců**. Záruka vstupuje v platnost dnem předání uživateli. Při uplatňování záruky musí být předložen **doklad o zakoupení a záruční list**. Bez těchto dokladů nebude záruka uznána.

Záruka se vztahuje na odstranění vad materiálu nebo výroby. Záruka se zejména nevztahuje na nedostatky vzniklé nesprávným používáním, opotřebením nebo použitím násilí. Záruka na akumulátor je **6 měsíců**.

Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká při neodborném zásahu jiné, než autorizované osoby.

V případě uplatnění záruční opravy zašlete výrobek s dokladem o zakoupení a záručním listem na adresu dodavatele nebo autorizované servisní opravny. Aby se předešlo škodám vzniklým při přepravě, je třeba použít vhodné balení.

Výrobek:

Výr. Číslo:

Datum výdeje:

Vydal (razítko, podpis):

Záruční oprava provedena dne

Podpis

Dodavatel a poskytovatel servisu: **Fonika Medical s.r.o.**, Nám. 14.října 3, 150 00 Praha 5
tel. 222 360 807
e-mail: info@fonika.cz

Upozornění: Po skončení životnosti nevyhazujte do směsného odpadu. Odevzdejte do recyklačních center, vyhrazených míst pro sběr elektroodpadu nebo u vašeho dodavatele. Na těchto místech budou přijata zdarma.



Dodavatel a poskytovatel servisu: **Fonika Medical s.r.o.** , Nám. 14.října 3, 150 00 Praha 5
tel. 222 360 807
e-mail: info@fonika.cz
www.fonika.cz